



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
Навчально-науковий
фізико-технічний інститут


С. М. Пономаренко, Ю. О. Тараненко

Електрика та магнетизм

Лабораторний практикум.

Електричне та магнітне поле.

Постійний струм

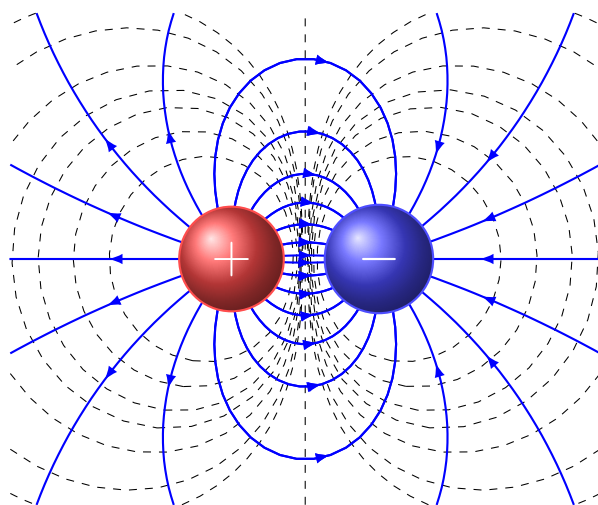

КИЇВ 2026

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

С. М. Пономаренко, Ю. О. Тараненко

Електрика та магнетизм

Лабораторний практикум.

Електричне та магнітне поле.

Постійний струм

Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями Еб Прикладна фізика та наноматеріали.

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2026

Зміст

Робота 1: Перевірка закону Кулона	3
Робота 2: Електричні поля та потенціали заряджених тіл	10
Робота 3: Джерела електричної енергії та їх характеристики	17
Робота 4: Магнітний момент у магнітному полі	24
Робота 5: Вимірювання магнітного поля Землі	31

Перевірка закону Кулона

Мета роботи

Перевірити закон Кулона:

1. Визначити залежність сили від заряду;
2. визначити залежність сили від відстані;
3. визначити електричну сталу в системі SI.

Ключові слова: *Закон Кулона, електричне поле, електричний заряд*

Обладнання: *штатив, крутильний динамометр, джерело високовольтної напруги, набір металевих кульок, металева пластина.*

1. Теоретичні відомості

З давніх-давен відоме явище електризації тіл тертям. Якщо потерти скляну або гумову паличку, вона притягуватиме шматочки паперу з силою, яка достатня для подолання їх ваги. Як ми тепер знаємо, завдяки тертю паличка набуває електричного заряду. Незважаючи на велику кількість різних речовин, в природі існують тільки два види електричних зарядів: заряди подібні тим, які виникають на склі, потертому об шовк, і заряди, подібні до тих, які з'являються на бурштині, потертому об хутро. Американський вчений Бенджамін Франклін у 1746 р. перший тип зарядів назвав «позитивними», другий — «негативними». В взаємодія двох таких зарядів один з одним подібна до притягування двох мас. Але на відміну від сил тяжіння, сили між двома зарядами можуть носити характер не лише притягування, а і відштовхування. Порівнюючи сили, що діють між різними зарядженими тілами, можна встановити, що однойменні заряди відштовхуються, а різнойменні притягують один одного. Точний закон взаємодії заряджених тіл було відкрито Шарлем Огюстеном Кулоном¹ в результаті експериментів і формулюється він наступним чином:

¹На початку 1770-х років цей закон експериментально відкрив Генрі Кавендіш, однак своїх результатів він не опублікував, і про них стало відомо тільки в кінці XIX ст. після вивчення й публікації його архівів. Натомість Шарль Кулон опублікував закон в двох мемуарах у 1785 році, які представив на розгляд Французької академії наук.

Визначення

Сила взаємодії двох точкових зарядів у вакуумі направлена вздовж прямої, що з'єднує ці заряди, пропорційна добутку їх величин і обернено пропорційна квадрату відстані між ними. Ця сила носить характер притягування, якщо знаки зарядів різні, і відштовхування — якщо ці знаки однакові.

У векторному вигляді закон Кулона записується наступним чином:

$$\vec{F}_{12} = k \cdot \frac{q_1 q_2}{r_{12}^2} \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}}, \quad (1.1)$$

де $\vec{F}_{12}$ — сила, р якою заряд 1 діє на заряд 2; q_1, q_2 — величини зарядів; $\vec{r}_{12}$ — вектор, напрямлений від заряду 1 до заряду 2 і за модулем дорівнює відстані між зарядами; k — коефіцієнт пропорційності, який залежить від вибору системи одиниць.

Для того, щоб закон був справедливим, необхідно, щоб виконувались наступні умови:

1. заряди мають бути точковими, тобто відстань між зарядженими тілами повинна бути набагато більша за їх розміри. Однак, на основі теореми Гауса можна довести, що сила взаємодії однорідно заряджених куль дорівнює силі взаємодії еквівалентних точкових зарядів, що розташовуються в центрах цих куль;
2. заряди мають бути нерухомі;
3. заряди мають знаходитись у вакуумі.

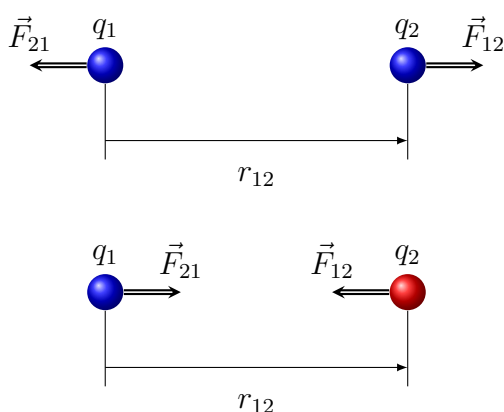


Рис. 1.1

Відкриття закону Кулона вперше дозволило розглядати заряд як певну кількість — вимірювати його. В законі Кулона ми маємо право вибрати одиницю виміру за власним уподобанням і покласти $k = 1$. Так, в системі СГС, одиничний заряд діє на рівний йому заряд на відстані в 1 см з силою в одну дину (дина є сила, яка збільшує швидкість тіла з масою в 1 г на 1 см/с²). Одиниця заряду, встановлена таким чином називається **Франкліном (Фр)**.

В практичній системі одиниць SI, заряд вимірюють в **Кулонах (Кл)**. Кулон є похідною одиницею системи SI і через основні одиниці Ампер (А) та секунду (с) визначається як $1 \text{ Кл} = 1 \text{ А} \cdot 1 \text{ с}$. В цій системі одиниць константа в законі Кулона дорівнює значенню $k = 8.9875 \cdot 10^9 \approx 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Н} \cdot \text{м}^2}{\text{Кл}^2}$. В теорії електромагнітного поля в системі SI цю константу прийнято представляти через іншу константу у вигляді:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}, \quad (1.2)$$

де $\varepsilon_0 = 8.85418782 \cdot 10^{-12} \frac{\text{А}^2 \cdot \text{с}^4}{\text{м}^3 \cdot \text{кг}}$ і називається електричною сталою.

Однією важливою особливістю кулонівської взаємодії є її величина. Електричні сили між окремими елементарними частинками набагато більше гравітаційних. Якби вдалося передати 1% електронів від однієї людини іншій, то на відстані витягнутої руки сила тяжіння між ними перевищувала б вагу Земної кулі. Взаємодія між зарядженими частинками настільки велика, що створити у невеликого тіла дуже великий заряд неможливо. Відштовхуючись один від одного з великою силою, частинки не зможуть утриматися на тілі. Ніяких же інших сил, які були б здатні в даних умовах компенсувати кулонівське відштовхування, в природі не існує. Ось одна з причин, чому помітне притягання та відштовхування заряджених тіл не зустрічається в природі. Крім того, заряджені тіла проявляють дуже велику схильність до нейтралізації. Вони з великою жадібністю вбирають заряди протилежного знака, притягаючи їх до себе. Більшість тіл в природі електрично нейтральні. Втім, сама Земля має негативний заряд близько $-6 \cdot 10^5$ Кл.

У чистому вигляді кулонівські сили працюють головним чином всередині нейтральних атомів. Підкреслимо ще, що знайомство з законом Кулона — це перший конкретний крок в напрямку вивчення властивостей електричного заряду і тим самим в з'ясуванні сенсу самого поняття електричного заряду. Сама наявність електричного заряду у елементарних частинок або тіл означає, що вони взаємодіють один з одним за законом Кулона.

Закон Кулона описує взаємодію зарядів з точки зору *далекодії*, тобто взаємодія заряджених тіл відбувається на відстані, без участі будь-якого проміжного матеріального агента². Однак, Фарадей і Максвелл розвинули інший погляд на природу взаємодії зарядів. Вони вважали, що навколо заряду існує електричне поле. На внесений в це поле заряд, воно діє з певною силою, в тій точці, в якій знаходиться заряд. Тобто Фарадей і Максвелл розвинули теорію *близькодії*, за якою взаємодія тіл відбувається через поле. Сила дії електричного поля на заряд описується виразом:

$$\vec{F} = q\vec{E}, \quad (1.3)$$

де $\vec{E}$ — є характеристикою електричного поля і називається *напруженістю* поля. Для випадку статичних полів, напруженість поля точкового заряду Q , як це впливає з теореми Гаусса (одного з рівнянь Максвелла):

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 4\pi Q \quad (1.4)$$

має вигляд:

$$\vec{E} = \frac{Q}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}. \quad (1.5)$$

²Детально описуючи ефекти гравітації, Ньютон відмовлявся вказувати на причину, завдяки якій тіла відчувають одне одного на відстані, що вилилось в його знаменитий фразі «*Hypotheses non fingo*» (Я не вигадую гіпотез)

Використовуючи (1.3) та (1.5) ми приходимо до закону Кулона:

$$\vec{F} = \frac{qQ}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}.$$

Тобто, фактично ми бачимо, що одна з основних особливостей закону Кулона — обернена пропорційність квадрату відстані $F \propto \frac{1}{r^2}$ — є наслідком теореми Гаусса.

А якщо $F \propto \frac{1}{r^{2 \pm \varepsilon}}$, де показник степені не 2, а відрізняється від нього на дуже малу величину $|\varepsilon| \neq 0$? Порушення «закону обернених квадратів» в законі Кулона призвело б до порушення теореми Гаусса, що в свою чергу призвело б до зміни всієї теорії електромагнітного поля, тому експериментальній перевірці закону Кулона було приділено багато уваги³.

Таблиця 1.1. Оцінки верхньої межі $|\varepsilon|$ ³

Автори	Рік	$ \varepsilon $
Cavendish	1773	$2.0 \cdot 10^{-2}$
Coulomb	1779	$4.0 \cdot 10^{-2}$
Maxwell	1892	$5.0 \cdot 10^{-5}$
Plimpton and Lawton	1936	$2.0 \cdot 10^{-9}$
Cochran and Franken	1967	$9.2 \cdot 10^{-12}$
Bartlett et al	1970	$1.3 \cdot 10^{-13}$
Williams et al	1971	$2.7 \cdot 10^{-16}$
Fulcher	1985	$1.0 \cdot 10^{-16}$
Crandal et al	1985	$6.0 \cdot 10^{-17}$

На основі своїх дослідів ще Кулон оцінив, що $|\varepsilon| \leq 4.0 \cdot 10^{-2}$. Подальші перевірки закону Кулона в лабораторних масштабах, які ґрунтувались на вимірюванні різниці потенціалів між концентрично зарядженими сферами⁴, встановили верхню межу для $|\varepsilon| \leq 6.0 \cdot 10^{-17}$ (табл. 1.1).

Що стосується мікроскопічних масштабів, то знамениті експерименти Резерфорда по розсіюванню α -частинок на тонкій металевій фользі показали, що закон Кулона справедливий на відстанях 10^{-11} см (розмір атомного ядра). Сучасні високоенергетичні експерименти з роз-

сіювання електронів та позитронів на ядрах довели, що закон Кулона працює навіть до відстаней 10^{-13} см⁵.

Перевірити справедливості закону Кулона на великих відстанях можна завдяки оцінці маси фотона. Теорія говорить про те, що порушення закону Кулона призвело б до того, що фотон мав би невелику масу, а наявність маси у фотона, в свою чергу, призвело б до деякої залежності швидкості поширення електромагнітних хвиль у вакуумі від довжини хвилі, що дає експериментальну

³Liang-Cheng Tu та Jun Luo. “Experimental tests of Coulomb’s Law and the photon rest mass”. В: *Metrologia* 41.5 (вер. 2004), S136—S146. DOI: [10.1088/0026-1394/41/5/s04](https://doi.org/10.1088/0026-1394/41/5/s04)

⁴Цікаво, що для встановлення «закону обернених квадратів» саме таким способом користувався Г. Кавендіш. Його робота починається з постановки проблеми «Метою таких експериментів була відповідь на питання: якщо порожниста куля електризується, чи заряджається мала куля, вкладаєна в першу і з’єднана з нею якимось провідником? Таким чином можна знайти закон електричного тяжіння і відштовхування». Подальші лабораторні перевірки є удосконаленням саме методу Кавендіша.

⁵V. Breton et al. “High-accuracy comparison of electron and positron scattering from nuclei”. In: *Phys. Rev. Lett.* 66 (5 Feb. 1991), pp. 572–575. DOI: [10.1103/PhysRevLett.66.572](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.66.572).

основу для такої оцінки. На сьогодні, така оцінка маси фотона підтверджує справедливість закону Кулона на масштабах до 10^{13} см³.

2. Ідея експериментів та устаткування

В лабораторній роботі пропонується повторити досліди Кулона з крутильними терезами. На відміну від класичних дослідів Кулона, де взаємодіяло два тіла (рис. 1.3), в цій лабораторній роботі використовується лише одне — куля, яка знаходиться поблизу заземленої пластини (рис. 1.4). Замість другого заряду протилежного знака використовується його зображення, яке утворюється завдяки заземленій металевій пластині (рис. 1.2).

Важливо усвідомити, що в якості відстані між зарядами слід брати подвоєну відстань між зарядом та металевією пластині, а величина заряду-зображення за модулем дорівнює величині заряду кульки.

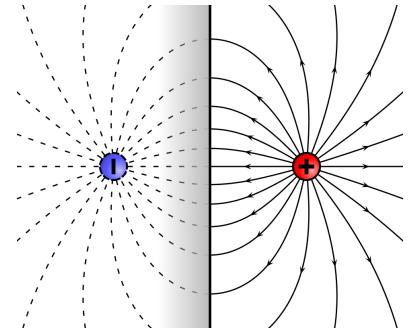


Рис. 1.2. Заряд та його зображення в заземленій металевій пластині

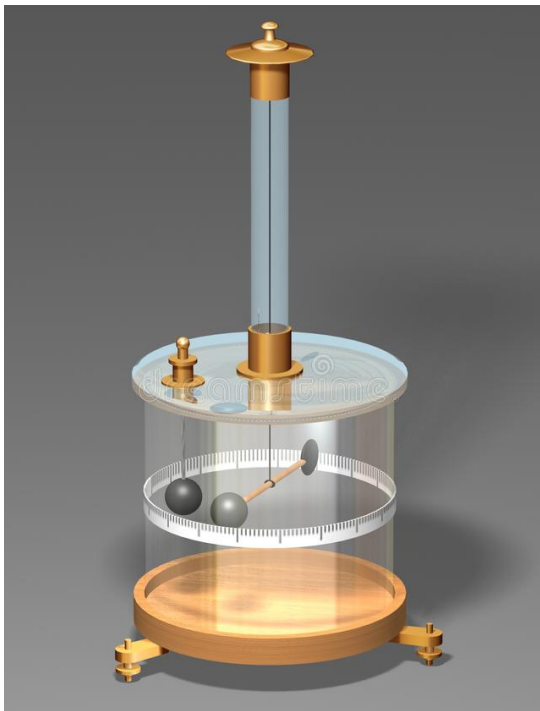


Рис. 1.3. Крутильні терези



Рис. 1.4. Експериментальна установка

В якості крутильних терезів в роботі використовується крутильний динамометр (рис. 1.5), на один край коромисла якого якого вішається куля, а на інший — важіль для її врівноваження. Коромисло може обертатися під дією моменту сил навколо вертикальної осі. Кут закрутки фіксується за допомогою шкали. Жорсткість стрічки та плече коромисла підібрані так, що на шкалі одразу зчитується значення діючої сили в мН.

Для надання кульці радіусом $r = 2$ см заряду, її під'єднують за допомогою тонкої дротини до джерела високої напруги (рис. 1.5). Величину заряду в залежності від потенціалу можна знайти за формулою:

$$q = 2.22 \cdot 10^{-12} \cdot \varphi, \quad (1.6)$$

де φ — потенціал.



Рис. 1.5. Крутильний динамометр



Рис. 1.6. Джерело високовольтної напруги

3. Хід експерименту

1. Зберіть установку. Металеву пластину під'єднайте до клема « $\perp$ » на джерелі високої напруги.
2. Зніміть залежність сили взаємодії F від квадрату заряду на кульці q^2 для відстані від кульки до пластини 4 см. Встановлюйте напругу на високовольтному джерелі з кроком 5 кВ і визначайте заряд за формулою (2.7).
3. Повторіть п. 1 для відстаней 5, 6, 7 та 8 см.
4. За результатами експериментів побудуйте залежності $F(q^2)$ для різних відстаней. Апроксимуйте залежністю $F = A \cdot (q^2)^{1+\sigma/2}$. Оцініть показник σ для різних відстаней.
5. За результатами експериментів побудуйте залежності $A(1/a^2)$. Апроксимуйте залежністю $A = \frac{k}{4} \cdot (1/a^2)^{1+\varepsilon/2}$. Оцініть показник ε , при якому апроксимація параметру k має найменшу похибку.

6. За результатами апроксимації п. 5 визначте константу пропорційності k в законі Кулона і порівняйте її з табличним значенням.

Контрольні питання

1. Сформулюйте закон Кулона.
2. Дайте означення напруженості електричного поля та потоку вектора напруженості.
3. Сформулюйте принцип суперпозиції для напруженості електричного поля.
4. Що таке лінії напруженості електричного поля? Який принцип їх побудови? Чи можуть вони перетинатись?
5. Сформулюйте теорему Гаусса. Знайдіть за її допомогою поля симетричних тіл.
6. Чому вимірюючи електричне поле в середині заряджених провідників можна довести «закон обернених квадратів»?
7. Чому закон Кулона можна перевіряти для кульок, які не є точковими тілами?
8. Перелічіть основні властивості електричного заряду.
9. Назвіть одиниці вимірювання електричного заряду в системі СГС та SI.
10. Які способи вимірювання електричного заряду ви знаєте?

Розрахункове завдання

1. Один з дослідів Кулона, за допомогою якого він переконався, що сила тяжіння між двома різнойменними точковими зарядами обернено пропорційна квадрату відстані між ними, полягав у наступному. У околі маленької зарядженої кульки q_1 підвішувалася на нитці невелика горизонтальна шелакова стрілка, на одному кінці якої було прикріплене невелике електрично заряджене кружальце із золотої фольги q_2 . Момент інерції стрілки I . Вимірювався період малих коливань стрілки T в залежності від її відстані d до зарядженої кульки. Припускаючи справедливим закон Кулона, знайти залежність періоду коливань стрілки від вказаної відстані та від інших параметрів системи. Довжина стрілки l дуже мала в порівнянні з відстанню d .

Електричні поля та потенціали заряджених тіл

Мета роботи

Визначити напруженість та потенціал заряджених тіл різної форми та різних взаємних розташувань.

Ключові слова: Закон Кулона, електричне поле, електричний заряд

Обладнання: штатив, крутильний динамометр, джерело високовольтної напруги, набір металевих кульок, металева пластина.

1. Теоретичні відомості

1.1. Напруженість поля. Силкові лінії

Навколо зарядженого тіла існує електричне поле: піднесений до нього пробний заряд q відчуває силу $\vec{F}$. Відношення сили до величини пробного заряду не залежить від q і є силовою характеристикою поля — **напруженістю**:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} \quad (2.1)$$

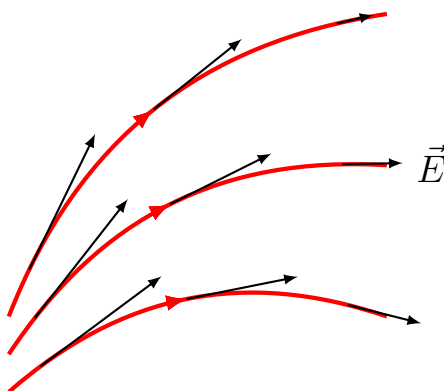


Рис. 2.1. Лінії напруженості електричного поля

Поле унаочнюють **силковими лініями** — лініями, дотична до яких у кожній точці збігається з напрямом $\vec{E}$ (рис. 2.1). Для точкового заряду (кульки) вони радіальні (рис. 2.2). Густіші лінії відповідають сильнішому полю; напрям ліній визначається знаком заряду.

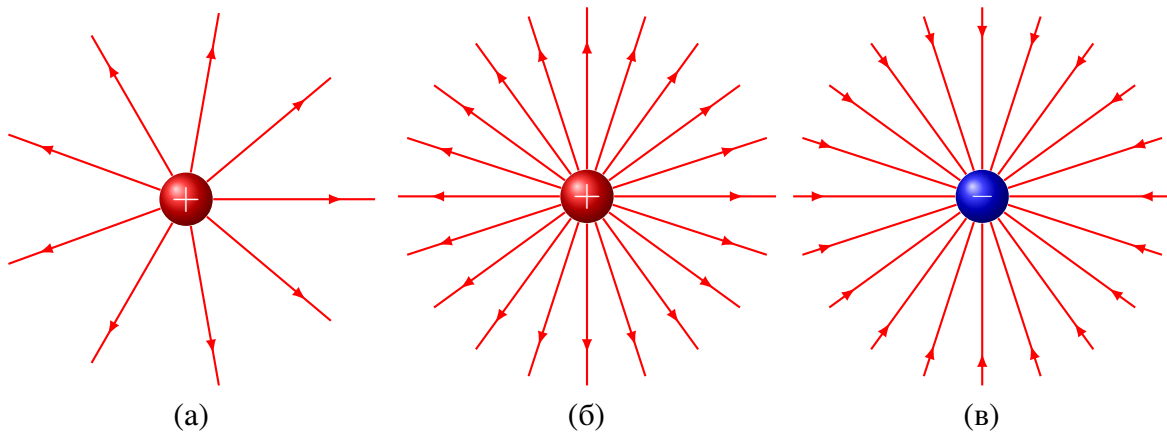


Рис. 2.2. Силкові лінії точкового заряду

1.2. Потенціал. Зв'язок із напруженістю

Електростатичне поле — потенціальне (консервативне): робота A_{12} з переміщення заряду q з точки 1 у точку 2 не залежить від траєкторії й дорівнює спаду потенціальної енергії:

$$A_{12} = W_{p1} - W_{p2} = -\Delta W_p. \quad (2.2)$$

Оскільки $W_p \propto q$, відношення $\varphi = W_p/q$ характеризує саме поле — це **потенціал**. Нульовий рівень обирають довільно: зазвичай $\varphi(\infty) = 0$ або $\varphi_{\text{землі}} = 0$; тоді φ даної точки чисельно дорівнює роботі з переміщення одиничного позитивного заряду з цієї точки в нескінченність.

Потенціал точкового заряду Q в середовищі з відносною проникністю ε на відстані r :

$$\varphi = k \frac{Q}{\varepsilon r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Q}{\varepsilon r}, \quad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}. \quad (2.3)$$

Знак φ збігається зі знаком Q . За принципом суперпозиції потенціал системи з n зарядів — алгебраїчна сума потенціалів кожного з них:

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i} \quad (2.4)$$

(для неперервного розподілу заряду суму замінює інтеграл).

Еквіпотенціальні поверхні — геометричне місце точок з $\varphi = \text{const}$. Напруженість пов'язана з потенціалом диференціальним співвідношенням

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi = -\vec{\nabla} \varphi; \quad (2.5)$$

знак « $-$ » означає, що $\vec{E}$ спрямований у бік найшвидшого *спадання* потенціалу.

Уздовж еквіпотенціальної поверхні $d\varphi = 0$, тому елементарна робота $dA = q \vec{E} \cdot d\vec{r} = -q d\varphi = 0$. Оскільки $q \neq 0$ і $|\vec{E}|, |d\vec{r}| \neq 0$, звідси $\vec{E} \cdot d\vec{r} = 0$, тобто кут між $\vec{E}$ і дотичною до поверхні $d\vec{r}$ дорівнює 90° . Отже, **силкові лінії завжди ортогональні еквіпотенціальним поверхням**.

Якщо поверхні побудовано з однаковим кроком потенціалу $\Delta\varphi = \text{const}$, то

$$E \approx \left| \frac{\Delta\varphi}{\Delta n} \right|, \quad (2.6)$$

де Δn — найкоротша (нормальна) відстань між сусідніми поверхнями: чим густіше розташовані поверхні, тим сильніше поле (аналог горизонталей на топографічній карті).

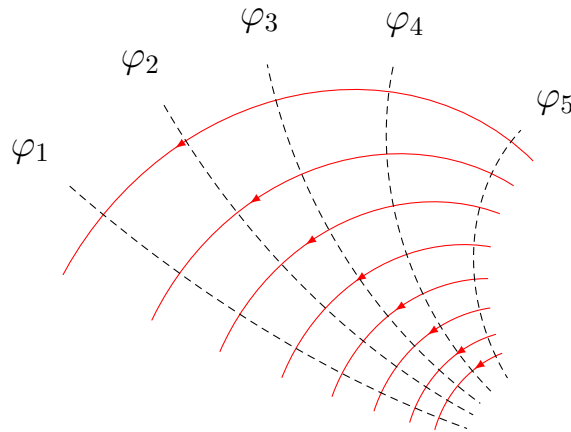


Рис. 2.3

1.3. Деякі конфігурації еквіпотенціальних поверхонь

На основі розглянутих властивостей будують картину еквіпотенціальних поверхонь (рис. 2.3, 2.4) для характерних конфігурацій:

1. **Два однойменні заряди** (рис. 2.4а): поблизу кожного заряду поверхні близькі до кіл (сфер); з віддаленням вони зливаються у гантелеподібну, а далі — овальну й практично сферичну поверхню. Посередині між зарядами $E = 0$.
2. **Два різнойменні заряди** (рис. 2.4б): площина симетрії між зарядами — плоска еквіпотенціальна поверхня з $\varphi = 0$; решта поверхонь замкнені навколо окремих зарядів і вигнуті в бік протилежного.
3. **Заряд над заземленою площиною** (рис. 2.4в): методом дзеркальних зображень поле еквівалентне полю диполя в одному напівпросторі; сама площина — еквіпотенціальна з $\varphi = 0$.

Силкові лінії та еквіпотенціальні поверхні — дві взаємодоповнювальні картини одного поля: перші показують напрям сили, що діє на заряд, другі — розподіл потенціальної енергії в просторі. Їхня взаємна ортогональність дозволяє відтворити одну картину за відомою іншою.

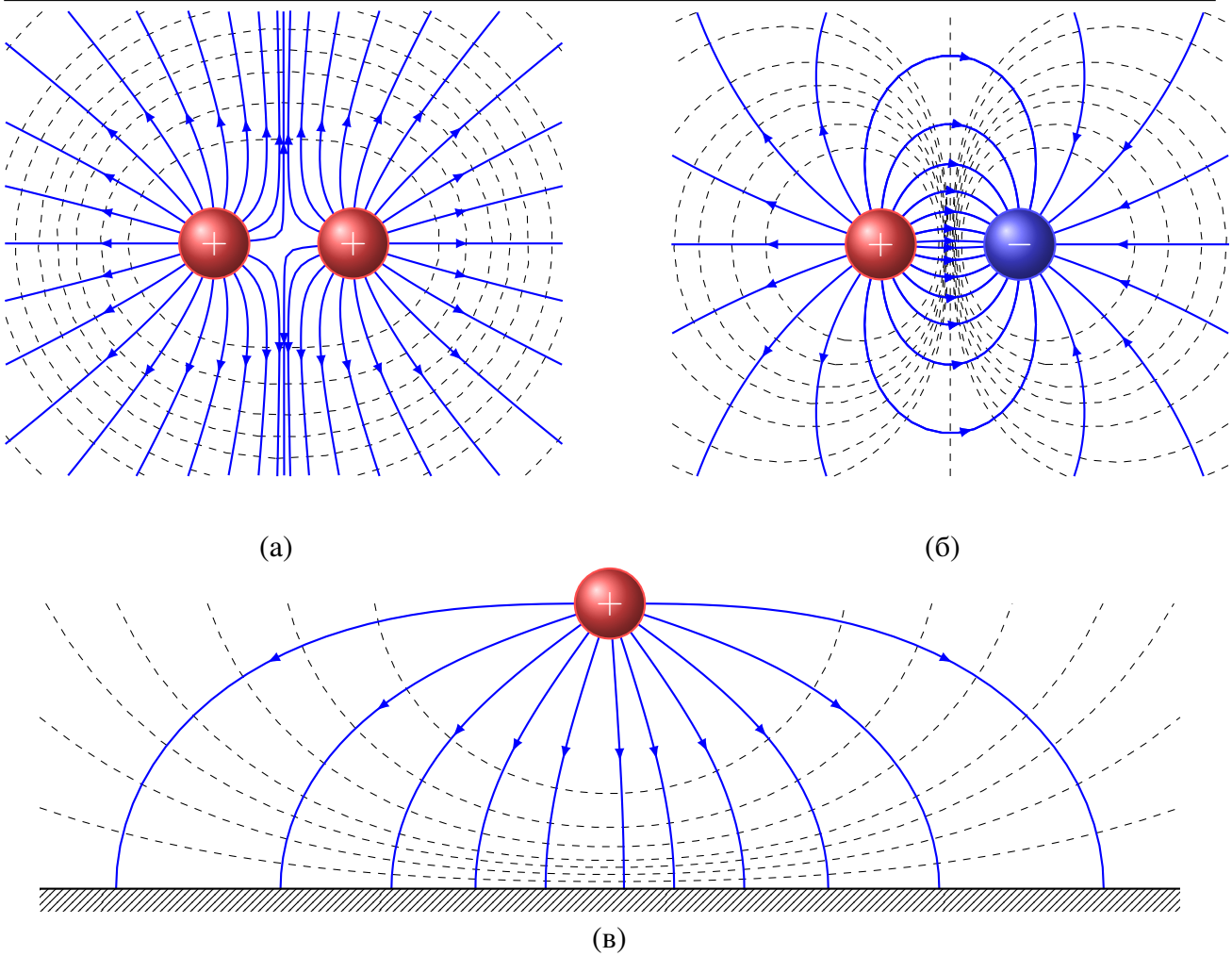


Рис. 2.4. Картини силових ліній (суцільні червоні лінії) та еквіпотенціальних поверхонь (штрихові сині лінії) для різних конфігурацій полів: а) точкового заряду; б) однорідного поля; в) електричного диполя

2. Ідея експерименту та устаткування

Провідний кульці радіусом $r = 2$ см, закріплений на ізолюваній стійці, через тонкий провідник надають заряд від джерела високовольтної постійної напруги (рис. 2.5).



Рис. 2.5. Джерело високовольтної напруги



Рис. 2.6. Потенціальний (польовий) зонд

Оскільки кулька електрично ізольована й віддалена від інших провідників, її ємність дорівнює ємності усамітненої сфери $C = 4\pi\epsilon_0 r$. Тому встановлений на джерелі потенціал φ і заряд кульки пов'язані лінійно:

$$q = C\varphi = 2.22 \cdot 10^{-12} \cdot \varphi \text{ [Кл]}, \quad (2.7)$$

де φ підставляють у вольтах (для $r = 2$ см у повітрі, $\epsilon \approx 1$).

Розподіл потенціалу в просторі навколо зарядженого тіла вимірюють **потенціальним (польовим) зондом** — електродом на ізольованому тримачі (рис. 2.6), з'єднаним із входом електрометра, що має надзвичайно великий вхідний опір ($\sim 10^{13}$ – 10^{14} Ом). Завдяки цьому колом зонд—електрометр тече лише мізерно малий струм, тому зонд практично не спотворює картину поля, яку вимірює.

Проте саме собою це ще не розв'язує задачі: сухе повітря — дуже хороший ізолятор, і металевий наконечник зонда *не встигає* набути потенціалу тієї точки простору, куди його внесли, — заряду, що надходить крізь повітря, для цього замало, і процес тривав би невиправдано довго та спотворювався б випадковими наведеннями. Щоб зонд надійно й швидко «підхоплював» саме локальний потенціал поля, його наконечник обладнують невеликим **пальником** (рис. 2.6): полум'я, що горить на газі (наприклад, побутовому чи міському, який підводять гнучким шлангом до скляної трубочки поряд із провідником), *іонізує повітря* безпосередньо біля наконечника. Іонізоване повітря стає слабко провідним — крізь нього заряд вільно й майже миттєво перетікає між навколишнім простором і металевим наконечником зонда, і зонд практично одразу набуває потенціалу тієї точки поля, у якій перебуває. Заряд, який при цьому передає полум'я, нехтувано малий порівняно із зарядом кульки, тому саме поле, що досліджується, не спотворюється. Якщо полум'я погасити, провідний місток «зонд—повітря» зникає: наконечник ізольований від довколишнього середовища, і показання електрометра стають недостовірними — повільними, нестабільними або близькими до випадкового дрейфу, а не до справжнього потенціалу точки.

Переміщуючи зонд уздовж лінійки (координатної рамки) на різні відстані r від центра кульки, знаходять залежність $\varphi(r)$ і перевіряють закон $\varphi = kQ/r$. Переміщуючи зонд по колу сталого радіуса, переконуються, що всі точки цього кола мають однаковий потенціал (еквіпотенціальна лінія); з'єднавши точки з однаковими показаннями при різних напрямках і відстанях, будують картину еквіпотенціальних ліній та — з огляду на їх ортогональність — картину силових ліній поля. За наявності другої кульки в такий же спосіб досліджують поле двох однойменних чи різнойменних зарядів (рис. 2.4).

3. Хід роботи

1. Ознайомтеся з розташуванням приладів. Переконайтеся, що регулятор високовольтного джерела виведено в нульове положення, а кулька й зонд розряджені (торкніться їх заземленим провідником).

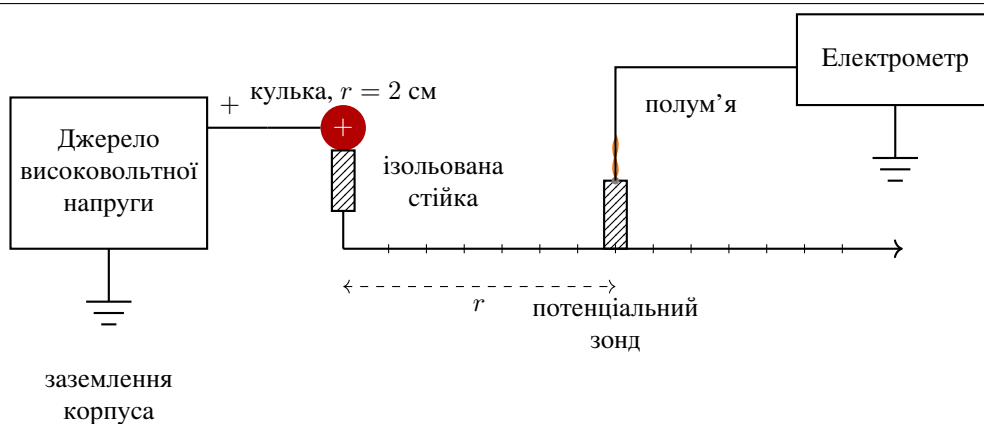


Рис. 2.7. Принципова схема установки: заряджена кулька з'єднана з джерелом високовольтної напруги; потенціальний зонд із пальником переміщують уздовж лінійки на різні відстані r від центра кульки та з'єднують із входом електрометра; корпуси джерела й електрометра заземлені

- Зберіть коло за схемою на рис. 2.7: кульку з'єднайте тонким провідником із виходом високовольтного джерела; зонд під'єднайте до входу електрометра; заземліть корпуси джерела й електрометра.
- Увімкніть електрометр і за відсутності напруги на кульці перевірте нульове положення шкали.
- Встановіть на джерелі перше значення потенціалу φ_1 (наприклад, 2 кВ) і занотуйте його.
- Розташовуючи зонд на 5–6 різних відстанях r від центра кульки вздовж одного напрямку, для кожної відстані запишіть покази електрометра $\varphi(r)$ у таблицю.
- Не змінюючи r , обведіть зондом кульку по колу й переконайтеся, що показання електрометра залишаються сталими (перевірка сферичної симетрії поля).
- Повторіть пп. 4–6 ще для 2–3 значень потенціалу джерела $\varphi_2, \varphi_3, \dots$
- Вимкніть джерело; розрядіть кульку, провідник і зонд заземленим стрижнем.
- За формулою (2.7) обчисліть заряд кульки q_i для кожного φ_i . Побудуйте графіки $\varphi(r)$ та $\varphi(1/r)$; за нахилом лінійної залежності $\varphi(1/r)$ визначте експериментальне значення сталої $k = 1/4\pi\epsilon_0$ і порівняйте його з табличним значенням.
- Оцініть похибку визначення k та зробіть висновок про виконання закону $\varphi \propto 1/r$ для поля зарядженої кульки.

Контрольні питання

- Що таке напруженість електричного поля? Як вона визначається через силу, що діє на пробний заряд, і чому це визначення не залежить від величини пробного заряду?
- Що таке потенціал електростатичного поля? Чому нульовий рівень потенціалу можна обирати довільно (наприклад, $\varphi(\infty) = 0$)?

3. Запишіть співвідношення між напруженістю та потенціалом поля. Що означає знак « $-$ » у формулі $\vec{E} = -\text{grad } \varphi$?
4. Доведіть, що силові лінії поля завжди перпендикулярні до екіпотенціальних поверхонь.
5. Як за густотою екіпотенціальних поверхонь (при однаковому кроці $\Delta\varphi$) оцінити, де напруженість поля більша, а де менша?
6. Чому заряд ізольованої провідної кульки пропорційний потенціалу, встановленому на джерелі напруги? Що таке ємність усамітненої сфери й від чого вона залежить?
7. Поясніть принцип роботи потенціального (польового) зонда. Чому для правильних вимірювань важливо, щоб електрометр мав надзвичайно великий вхідний опір?
8. Навіщо на наконечнику зонда підтримують невелике полум'я? Що зміниться в показаннях електрометра, якщо це полум'я погасити?
9. Як експериментально перекоонатися, що поле зарядженої кульки має сферичну симетрію?
10. Яким чином, побудувавши графік $\varphi(1/r)$, визначити з експерименту сталу $k = 1/4\pi\epsilon_0$ і оцінити похибку її визначення?
11. Як зміниться картина екіпотенціальних поверхонь, якщо взяти два однойменні заряди замість одного точкового? Чому посередині між ними $E = 0$?

Розрахункове завдання

Провідній кульці радіусом $r = 2$ см, що перебуває в повітрі ($\epsilon = 1$), надали заряд, підключивши її до джерела високої напруги, встановленого на потенціал $\varphi_0 = 15$ кВ.

Визначте:

1. заряд q , який отримала кулька;
2. напруженість поля E_0 безпосередньо біля поверхні кульки;
3. потенціал φ_1 і напруженість поля E_1 у точці, віддаленій від центра кульки на $r_1 = 10$ см.

Скористайтесь формулою (2.7) та співвідношеннями $\varphi = kQ/r$, $E = kQ/r^2 = \varphi/r$.

Джерела електричної енергії та їх характеристики

Мета роботи

Визначити напруженість та потенціал заряджених тіл різної форми та різних взаємних розташувань.

Ключові слова: Закон Кулона, електричне поле, електричний заряд

Обладнання: штатив, крутильний динамометр, джерело високовольтної напруги, набір металевих кульок, металева пластина.

1. Теоретичні відомості

Електричним струмом називають упорядкований рух електричних зарядів в провідному середовищі під дією електричного поля.

Мірою інтенсивності руху зарядів є *сила струму* I — кількість заряду, що проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу:

$$I = \frac{dq}{dt}. \quad (3.1)$$

Для постійного струму ($I = \text{const}$):

$$I = \frac{q}{t}. \quad (3.2)$$

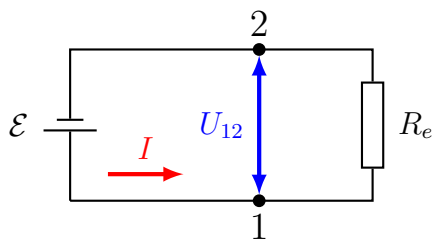


Рис. 3.1. Електричне коло

Електричний струм на ділянці виникає тоді, коли на її затискачах існує різниця потенціалів (електричне поле вздовж ділянки).

Напруга (або падіння напруги) між двома точками — це різниця їхніх потенціалів. Для точок 1 і 2 (рис. 3.1): $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$. Якщо $U_{12} > 0$, то $\varphi_1 > \varphi_2$, і струм тече від точки 1 до точки 2.

Напруга чисельно дорівнює роботі A , яку виконує джерело при переміщенні одиничного заряду між двома точка-

ми:

$$U_{12} = \frac{A_{12}}{q}. \quad (3.3)$$

Потужність — робота, яку виконує джерело за одиницю часу на даній ділянці кола:

$$P = \frac{A_{12}}{t} = U_{12}I. \quad (3.4)$$

Електрорушійна сила (ЕРС) $\mathcal{E}$ — це робота сторонніх (неелектростатичних) сил джерела при переміщенні одиничного заряду по замкнутому колу:

$$\mathcal{E} = \frac{A}{q}. \quad (3.5)$$

Потужність, що розвивається джерелом:

$$P = \mathcal{E}I. \quad (3.6)$$

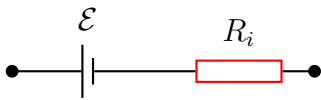


Рис. 3.2. Еквівалентна схема джерела

Внутрішній опір R_i — опір електричному струму всіх елементів всередині генератора (рис. 3.2).

Якщо $R_i \ll R_e$, то напруга на клеммах джерела практично не залежить від струму навантаження і дорівнює ЕРС. Таке джерело називають *ідеальним джерелом напруги* ($R_i = 0$). Якщо ж $R_i \gg R_e$, то струм у зовнішньому колі практично не залежить від опору навантаження — це *ідеальне джерело струму*. Надалі будемо вважати, що ЕРС та внутрішній опір джерела не залежать від струму.

В електричному колі (рис. 3.1) при зміні навантаження R_e від нуля до нескінченності змінюються I і U . Розглянемо найбільш характерні режими роботи джерела:

1. **Режим холостого ходу:** $R_e \rightarrow \infty$, $I = 0$, $U = \mathcal{E}$.
2. **Номинальний режим:** від джерела відбирається найбільша тривала потужність без перегрівання. Нагрівання зумовлено внутрішніми втратами: $P_i = I^2 R_i$.
3. **Режим короткого замикання:** $R_e = 0$, $U = 0$, $I = I_{\text{кз}} = \mathcal{E}/R_i$. Для джерел з малим R_i (акумулятори) це аварійний режим.
4. **Режим узгодження:** $R_e = R_i$ — максимальна потужність у навантаженні.

Коефіцієнт корисної дії (ККД) η визначається відношенням потужності в навантаженні ($P_e = I^2 R_e$) до повної потужності джерела ($P = \mathcal{E}I$):

$$\eta = \frac{P_e}{P} = \frac{I^2 R_e}{I^2 R_i + I^2 R_e} = \frac{R_e}{R_i + R_e}. \quad (3.7)$$

З формули видно: чим більше R_e порівняно з R_i , тим вищий ККД.

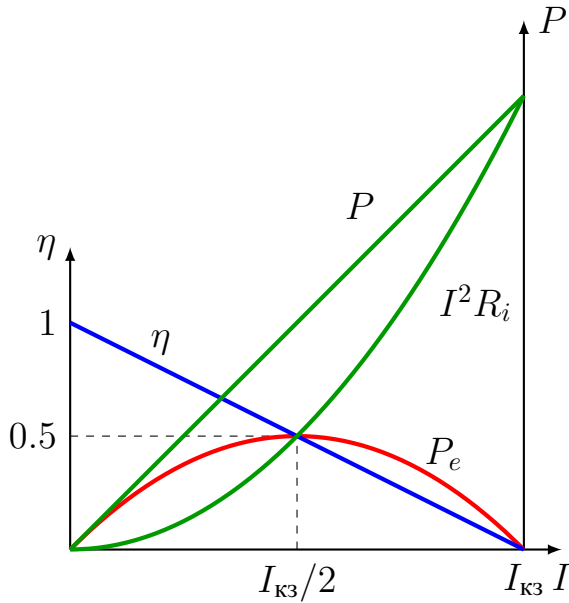


Рис. 3.3. Діаграма режимів роботи джерела електроенергії

При узгодженому режимі ($R_e = R_i$) у приймачі виділяється найбільша потужність. Цей режим використовується у вимірювальних колах, пристроях обчислювальної та інформаційної техніки, засобів зв'язку. В цьому випадку $\eta = 1 - \frac{I}{I_{кз}}$, де $I_{кз}$ — струм короткого замикання. Потужність у навантаженні при цьому:

$$P_e = \frac{\mathcal{E}^2}{4R_i}, \quad (3.8)$$

а ККД дорівнює 50 %.

При передачі великих потужностей (енергетика) режим узгодження є неприпустимим — там ККД має бути якнайвищим. Обов'язкова умова: $R_e \gg R_i$.

На рис. 3.3 наведено залежності η , P_e , $I^2 R_i$ та P від струму I . З кривих видно, що найбільша потужність у навантаженні досягається при $I = I_{кз}/2$, або що те ж — при $R_e = R_i$.

2. Теоретичне підґрунтя роботи

2.1. Закони Ома та ідея дослідів

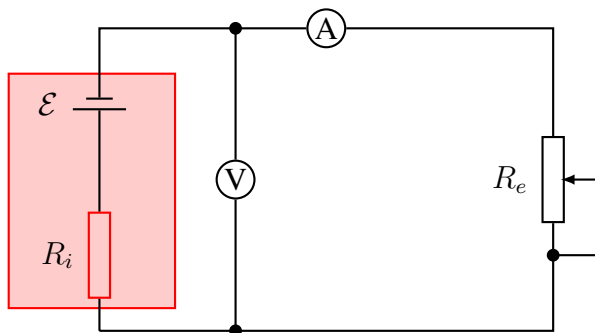


Рис. 3.4. Послідовне з'єднання елементів

Реальні джерела описуються в еквівалентній схемі як послідовно з'єднані ідеальне джерело напруги $\mathcal{E}$ і внутрішній опір R_i (рис. 3.4). Напруга на клеммах і сила струму залежать від зовнішнього опору R_e .

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R_i + R_e}. \quad (3.9)$$

Вихідна напруга (напруга на клеммах джерела):

$$U = \mathcal{E} - R_i I. \quad (3.10)$$

Зовнішній опір у робочій точці визначається як:

$$R_e = \frac{U}{I}. \quad (3.11)$$

Формула (3.10) описує лінійну залежність $U(I)$, де вільний член дає $\mathcal{E}$ (ЕРС — напруга при $I = 0$, тобто в режимі холостого ходу), а нахил прямої дорівнює $-R_i$. Тому:

$$\operatorname{tg} \varphi = -R_i, \quad (3.12)$$

де φ — кут нахилу залежності $U(I)$ до осі I (рис. 3.5).

Зауваження

Не плутати два різні нахили на графіку $U(I)$:

1) Нахил самої прямої $U(I)$ — визначає R_i через $\operatorname{tg} \varphi = -R_i$.

2) Нахил прямої від початку координат до робочої точки — визначає зовнішній опір $R_e = U/I$ в цій точці.

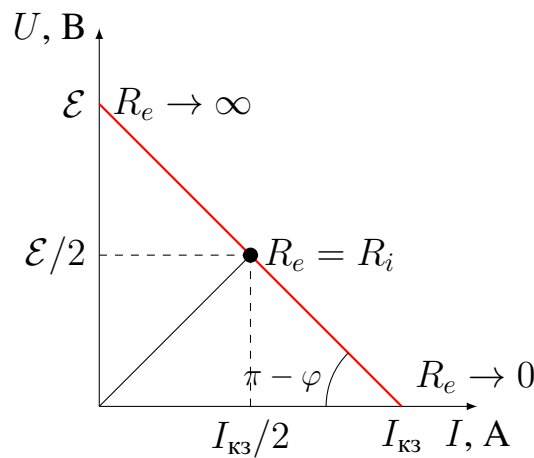


Рис. 3.5. Характеристика джерела із сталим внутрішнім опором R_i .

Таким чином, лінійна залежність $U(I)$ означає, що внутрішній опір R_i є сталим.

Для нашої роботи ми будемо аналізувати три типи навантаження:

1. **Холостий хід:** $R_e \rightarrow \infty$. Струм не тече, немає падіння напруги на R_i , тому $U = \mathcal{E}$.
2. **Коротке замикання:** $R_e = 0$. Все падіння напруги — на внутрішньому опорі, тому $U = 0$. Струм короткого замикання:

$$I_{\text{кз}} = \frac{\mathcal{E}}{R_i}. \quad (3.13)$$

3. **Узгодження потужності:** $R_e = R_i$. У цьому випадку $U = \frac{\mathcal{E}}{2}$, $I = \frac{I_{\text{кз}}}{2}$.

Пронормуємо виміряні значення напруги U та струму I на максимальні значення — напругу холостого ходу $\mathcal{E}$ та струм короткого замикання $I_{\text{кз}}$. З рівнянь (3.9) та (3.13):

$$\frac{I}{I_{\text{кз}}} = \frac{1}{1 + \frac{R_e}{R_i}}. \quad (3.14)$$

Рівняння (3.10) дає

$$\frac{U}{\mathcal{E}} = 1 - \frac{1}{1 + \frac{R_e}{R_i}}, \quad (3.15)$$

або, враховуючи (3.14):

$$\frac{U}{\mathcal{E}} + \frac{I}{I_{\text{кз}}} = 1. \quad (3.16)$$

Тобто нормовані залежності напруги та струму від навантаження є взаємно протилежними (рис. 3.6).

2.2. Потужність та ККД

Визначимо співвідношення між потужностями елементів кола. Максимальна потужність кола (при короткому замиканні):

$$P_0 = \mathcal{E} I_{\text{кз}}. \quad (3.17)$$

Потужність на внутрішньому опорі R_i :

$$P_i = I^2 R_i. \quad (3.18)$$

Потужність на навантаженні R_e :

$$P_e = I^2 R_e. \quad (3.19)$$

Нормуємо потужність навантаження (3.19) на максимальну (3.17):

$$\frac{P_e}{P_0} = \frac{U}{\mathcal{E}} \cdot \frac{I}{I_{\text{кз}}} = \frac{R_e/R_i}{(1 + R_e/R_i)^2}. \quad (3.20)$$

Залежність P_e/P_0 від R_e/R_i має максимум при $R_e = R_i$ (рис. 3.6) — джерело віддає в навантаження максимальну потужність у режимі узгодження.

3. Експериментальне устаткування

Експериментальне устаткування складається з трьох типів джерел електричної енергії:

- **свинцево-кислотний акумулятор** (12 В) — джерело з малим внутрішнім опором;
- **плоска батарея** 4,5 В (три послідовно з'єднані елементи Лекланше) — джерело із середнім внутрішнім опором;
- **нікель-кадмієвий акумулятор** (1,2 В) — джерело з дуже малим внутрішнім опором.

Як змінне навантаження використовується реостат на 100 Ом або на 10 Ом (залежно від типу джерела). Вимірювальні прилади — високоомний цифровий мультиметр (як вольтметр) та магнітоелектричний мультиметр класу точності 0,5 (як амперметр).

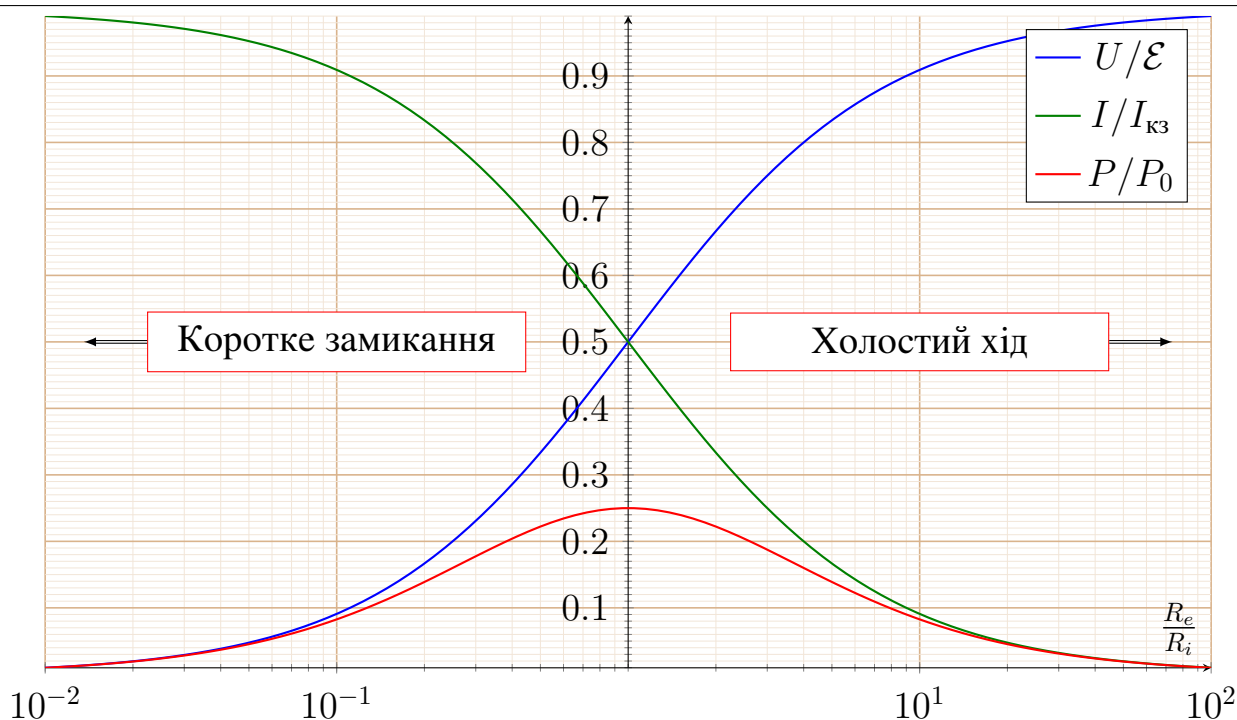


Рис. 3.6. Діаграма режимів для джерела електроенергії

4. Хід експерименту

Частина 1. Зняття вольт-амперної характеристики

1. Зберіть вимірювальну схему згідно з рис. 3.4. Як змінний резистор R_e використовуйте реостат на 100 Ом.
2. Встановіть реостат у положення максимального опору ($R_e \rightarrow \infty$) і виміряйте напругу холостого ходу $U_0 \approx \mathcal{E}$.
3. Змінюючи опір реостата, знімайте залежність $U(I)$ — від режиму холостого ходу ($I = 0$) до максимально допустимого струму з кроком $\Delta I \approx 0,1$ А.
4. Занесіть результати до таблиці 3.1. Для кожної точки обчисліть $R_e = U/I$.

Таблиця 3.1. Вимірювання вольт-амперної характеристики

I, A	$U, \text{В}$	$R_e, \text{Ом}$	$R_i, \text{Ом}$	R_e/R_i	P_e/P_0	P_i/P_0	P/P_0	η

Частина 2. Визначення параметрів джерела

1. Побудуйте графік залежності $U(I)$.
2. Апроксимуйте отримані точки прямою лінією $U = \mathcal{E} - R_i I$. Підказка: ЕРС $\mathcal{E}$ — це значення U при $I = 0$ (точка перетину з віссю U); внутрішній опір R_i — це модуль нахилу прямої:

$$R_i = -\frac{\Delta U}{\Delta I}.$$

3. Визначте струм короткого замикання $I_{\text{кз}} = \mathcal{E}/R_i$ (точка перетину прямої з віссю I).
4. Позначте на графіку точку узгодження ($R_e = R_i$, тобто $I = I_{\text{кз}}/2$, $U = \mathcal{E}/2$).

Частина 3. Аналіз потужностей та ККД

1. Обчисліть $P_0 = \mathcal{E} \cdot I_{\text{кз}}$ (максимальна потужність джерела).
2. Для кожної точки таблиці обчисліть нормовані величини P_e/P_0 , P_i/P_0 , P/P_0 та ККД η і занесіть до таблиці 3.1.
3. Побудуйте нормовані діаграми потужностей у функції від R_e/R_i , аналогічні рис. 3.6. Використайте логарифмічну шкалу по осі x .
4. Порівняйте вигляд отриманого графіка з теоретичним (рис. 3.6) та прокоментуйте розбіжності.

Частина 4. Класифікація джерела

1. Порівняйте R_i , отриманий з апроксимації, з типовими значеннями R_e з таблиці вимірювань: чи $R_i \ll R_e$, чи $R_i \sim R_e$, чи $R_i \gg R_e$?
2. Зробіть висновок: чи наближається досліджуване джерело до ідеального джерела напруги ($R_i \ll R_e$), чи до ідеального джерела струму ($R_i \gg R_e$)?

Контрольні питання

1. Що таке електрорушійна сила (ЕРС) джерела та який її фізичний зміст?
2. Чим відрізняється ЕРС від напруги на клеммах джерела?
3. Запишіть закон Ома для повного кола.
4. Що таке внутрішній опір джерела і як він впливає на струм у колі?
5. Як змінюється напруга на клеммах джерела при збільшенні струму?
6. Що таке режим холостого ходу і які значення струму та напруги при цьому?
7. Що таке коротке замикання? Запишіть формулу струму короткого замикання.
8. Як експериментально визначити ЕРС і внутрішній опір джерела?
9. Який вигляд має графік залежності напруги від струму $U(I)$ і що означає його нахил?
10. За якої умови потужність, що виділяється на навантаженні, є максимальною?

Магнітний момент у магнітному полі

Мета роботи

Визначити момент сили, зумовлений магнітним моментом в постійному магнітному полі, як функцію:

- індукції магнітного поля;
- кута між напрямком магнітного поля та магнітного моменту;
- величини магнітного моменту.

За результатами експериментів визначити константу котушок Гельмгольца.

Ключові слова: Закон Кулона, електричне поле, електричний заряд

Обладнання: штатив, крутильний динамометр, джерело високовольтної напруги, набір металевих кульок, металева пластина.

1. Теоретичне підґрунтя

1.1. Що таке магнітний момент

Магнітний момент, або **магнітний дипольний момент** — векторна величина, що характеризує взаємодію тіла з магнітним полем.

Означення магнітного моменту:

$$\vec{p}_m = \frac{1}{2} \int_V \vec{r} \times \vec{j} dV, \quad (4.1)$$

де $\vec{j}dV$ — елемент об'ємного струму. У випадку елемента лінійного струму $I\vec{dl}$ формула (4.1) перетворюється на вираз:

$$\vec{p}_m = \frac{I}{2} \oint_L \vec{r} \times \vec{dl}. \quad (4.2)$$

Використовуючи формулу (4.2) можна знайти момент кільцевого витка зі струмом:

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}, \quad (4.3)$$

де $\vec{n}$ — вектор нормалі до плоскої поверхні витка. Напрямок вектора нормалі співпадає з правилом правого гвинта (рис. 4.1).

Магнітне поле впливає на магнітний диполь. Зокрема, на виток зі струмом, що вміщений в однорідне магнітне поле діє обертовий момент:

$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}. \quad (4.4)$$

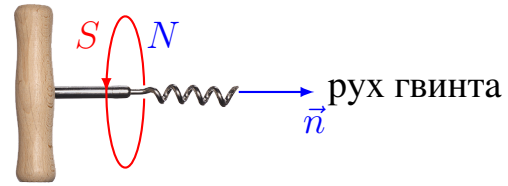


Рис. 4.1. Полюса витка

Вираз (4.4) є фундаментальним фактом, тобто достовірність має бути перевірена на досліді.

Зокрема, вираз (4.4) дає можливість ввести кількісну характеристику магнітного поля — *вектора індукції*.

Для цього необхідно взяти виток з одиничним магнітним моментом, який ми визначили за формулою (4.3). Для того, щоб магнітний момент витка був одиничним, необхідно, щоб по ньому йшов струм в $I = 1$ Ампер, а площа такого витка дорівнювала $S = 1 \text{ м}^2$. Розташуємо тепер виток так, щоб його магнітний момент був перпендикулярним до магнітного поля і виміряємо момент сили, тоді це значення і буде те число, яким ми кількісно охарактеризуємо магнітне поле¹:

$$B = \frac{M}{p_m}. \quad (4.5)$$

Ця величина називається індукцією магнітного поля. В системі одиниць SI, ця величина вимірюється в Теслах, скорочено – Тл:

$$1\text{Тл} = \frac{1 \text{ Н} \cdot \text{м}}{\text{А} \cdot \text{м}^2}. \quad (4.6)$$

1.2. Котушки Гельмгольца

Котушки Гельмгольца (кільця Гельмгольца) — пристрій, що складається з двох однакових тонких соленоїдів, розташованих на одній осі на відстані один від одного, що дорівнює їх радіусам (рис. 4.2) і які з'єднані послідовно таким чином, щоб струм у них циркулював в однаковому напрямку. Котушка названа на честь **Германа фон Гельмгольца**. Розташування двох соленоїдів на віддалі радіуса один від одного забезпечує таку однорідність поля вздовж осі, при якій відмінною від нуля є тільки четверта похідна від поля. Використовуються для отримання постійного, змінного або імпульсного магнітного поля з зоною однорідності, яке зазвичай використовується в експериментах, а також для калібрування датчиків магнітної індукції, намагнічування і розмагнічування постійних магнітів, розмагнічування сталевих заготовок, деталей і інструментів.

¹Характеристику магнітного поля — індукцію — не можна ввести аналогічно до того способу, яким вводиться характеристика електричного поля — напруженість, тобто через силу, що діє на одиничний заряд, оскільки в природі не існує магнітного заряду (**монополя**)

Область поля з неоднорідністю менше 1 % є еліпсоїдом обертання близьким до сфери радіусом $0.3R$, що майже в 4 рази більше ніж для одного кільця. Еліпсоїд трохи стислий уздовж осі (рис. 4.3).

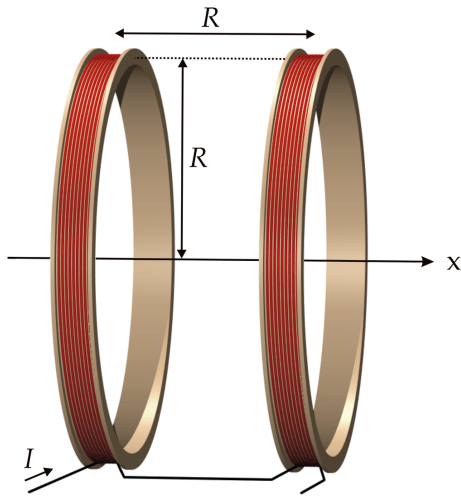


Рис. 4.2. Схема котушок Гельмгольца (взято з [wikipedia](#))

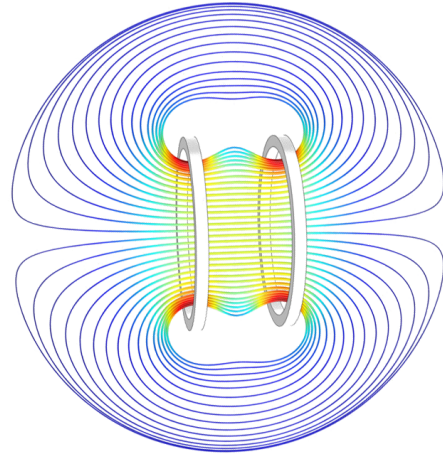


Рис. 4.3. Вигляд поля котушок Гельмгольца (взято з <https://www.freepng.ru/png-d02278/>)

Магнітне поле в центрі між котушками можна розрахувати за допомогою закону Біо-Савара-Лапласа, який дає формулу:

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 n I}{R}. \quad (4.7)$$

Константою котушок називається величина $C = \frac{B}{I}$, яка, як випливає з (4.7) визначається формулою:

$$C = \left(\frac{4}{5}\right)^{\frac{3}{2}} \frac{\mu_0 n}{R}, \quad (4.8)$$

де n — кількість витків в одному кільці, R — радіус кільця.

Таблиця 4.1. Параметри котушок

Величина	Значення
Кількість витків в одному кільці	$N = 154$
Радіус кільця	$R = 0.2 \text{ м}$
Константа котушок	$C = 6.92 \cdot 10^{-4} \text{ Тл/А}$

станням даних таблиці 4.1 дає значення:

$$C = 6.92 \cdot 10^{-4} \text{ Тл/А}. \quad (4.9)$$

В даній лабораторній роботі використовуються котушки Гельмгольца, параметри яких подані в табл. 4.1.

Розраховане значення константи котушок за формулою (4.8) з викори-

2. Робоча формула

Якщо магнітне поле буде неоднорідним, то воно буде різне на різних частини контура, який вміщений у це магнітне поле і, відповідно, на різні частини контура діяти різний обертальний момент. Для того, щоб цього уникнути, бажано використовувати однорідне магнітне поле, що забезпечується завдяки котушкам Гельмгольца.

У даній роботі контур — це пласка петля, що має N витків, по якій тече постійний струм I' , діаметр кільця d . А тому, його магнітний момент дорівнює згідно з (4.3):

$$p_m = I' \frac{N\pi d^2}{4},$$

а обертальний момент згідно (4.4) тоді визначатиметься як:

$$M = I' \frac{N\pi d^2}{4} B \sin \alpha.$$

Далі, враховуючи, що магнітне поле котушок Гельмгольца пропорційні силі струму, що тече по ним ($B = CI$, де C — величина, що залежить від параметрів котушок і називається *константою котушок Гельмгольца*) можемо записати:

$$M = \frac{\pi}{4} C I I' N d^2 \sin \alpha. \quad (4.10)$$

3. Експериментальне устаткування

Експериментальне устаткування (рис. 4.4) складається з котушок Гельмгольца, крутильних терезів (моментометру) з пристроєм для утримання електричного контура, двох стабілізованих джерел живлення (рис. 4.5), двох амперметрів і набору контурів. Обладнання слід збирати так, як показано на схемі рис. 4.6. Зверніть увагу, що котушки Гельмгольца з'єднуються між собою послідовно. Дроти, що підводять струм до контуру мають звисати вільно і повинні бути скручені разом, щоб не створювати додатковий обертальний момент.

Додаткова інформація

Нульова точка відліку крутильних терезів має часто перевірятися, оскільки швидкий обертальний рух пристроя, а також кожне стороннє втручання (заміна контуру, заміна кута, тощо) може зашкодити її положенню.

4. Хід роботи

1. Збираємо лабораторну установку (рис. 4.4). Одне джерело струму (рис. 4.5) через амперметр приєднується до котушок Гельмгольца (рис. 4.6), інше — до контуру (рис. 4.7). Треба простежити, щоб провідники, які підводять струм до контуру не спричиняли додатковий обертальний момент.



Рис. 4.4. Експериментальна установка



Рис. 4.5. Джерело живлення

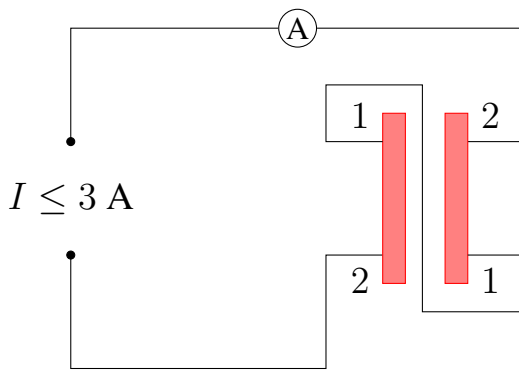


Рис. 4.6. Схема з'єднання котушок

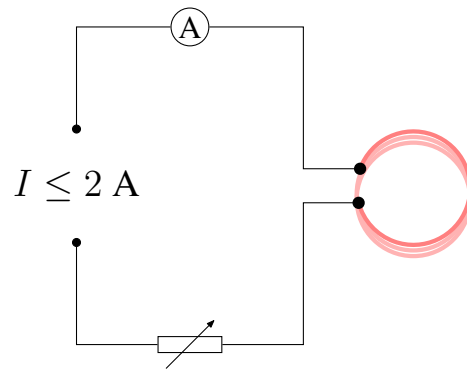


Рис. 4.7. Схема з'єднання контура

Крутильні терези мають бути встановлені таким чином, щоб контур знаходився точно в центрі між котушками.

- Дослід 1.** Зніміть залежність обертового моменту M від сили струму в контурі I' . Для цього використовуйте найбільший за діаметром контур з найбільшим числом витків N . Встановіть найбільший струм $I = 3$ А через котушки Гельмгольца і кут $\alpha = 90^\circ$.
- Дослід 2.** Зніміть залежність обертового моменту M від сили струму в контурі I' . Для цього використовуйте найбільший за діаметром контур з найбільшим числом витків N . Встановіть найбільший струм $I' = 2$ А через контур і кут $\alpha = 90^\circ$.
- Дослід 3.** Зніміть залежність обертового моменту M від кута α в інтервалі $-90^\circ \dots 90^\circ$ з кроком 15° . Для цього використовуйте найбільший за діаметром контур з найбільшим числом витків N . Встановіть найбільший струм $I' = 2$ А через контур і котушки Гельмгольца $I = 3$ А. Кут α слід змінювати використовуючи позначки на пристрої, що тримає контур. Позначки на нерухомій частині пристрою зроблено через 45° , а на рухомій — через 30° . Таким чином, суміщаючи відповідні позначки, можна забезпечити крок в 15° .
- Дослід 4.** Зніміть залежність обертового моменту M від квадрату діаметру петлі d^2 . Для цього використовуйте найбільший за діаметром контур з найбільшим числом витків N . Встановіть найбільший струм

$I' = 2$ А через контур і котушки Гельмгольца $I = 3$ А та кут $\alpha = 90^\circ$.

6. **Дослід 5.** Зніміть залежність обертового моменту M від кількості витків N . Встановіть найбільший струм $I' = 2$ А через контур і котушки Гельмгольца $I = 3$ А та кут $\alpha = 90^\circ$.

5. Завдання

- За результатами дослідів 1 – 5 побудуйте графіки залежності обертового моменту від усіх досліджуваних параметрів:
 - Для дослідів 1 — $M = M(I')$;
 - Для дослідів 2 — $M = M(I)$;
 - Для дослідів 3 — $M = M(\sin \alpha)$;
 - Для дослідів 4 — $M = M(d^2)$;
 - Для дослідів 5 — $M = M(N)$;
- З лінійної апроксимації відповідних залежностей для кожного дослідів, визначте константу котушок Гельмгольца, використовуючи формулу (4.10).
- Порівняйте отримані значення з таким, що розрахований за законом Біо-Савара-Лапласа (4.9).

Контрольні запитання

- Що таке магнітна індукція та одиниці її вимірювання в СИ та СГС? Як визначається напрямок вектора $\vec{B}$? Що таке лінії магнітної індукції?
- Що таке вектор $\vec{H}$ та одиниці його вимірювання в СИ та СГС?
- Що таке магнітний диполь? Чим він характеризується? Наведіть приклади.
- Як розрахувати магнітний момент контура зі струмом?
- Як визначається магнітне поле магнітного диполя.
- У чому полягає закон Біо-Савара-Лапласа? Яка магнітна індукція поля, створюваного елементом струму?
- Як виглядають лінії магнітної індукції поля витка зі струмом?
- Які сили діють на контур зі струмом в однорідному магнітному полі? Як розрахувати величину крутного моменту цих сил?

Розрахункові завдання

- Розрахуйте магнітну індукцію поля на осі кругового витка зі струмом в його центрі і на відстані r від центру?
- З закону Біо-Савара-Лапласа виведіть значення константи котушок Гельмгольца.
- Розрахуйте магнітне поле нескінченно довгого провідника зі струмом I на відстані r . Як розрахувати магнітне поле частини такого провідника? Наведіть розрахунки.

4. Розрахуйте магнітний момент однорідно зарядженої кулі радіусом R , що обертається із кутовою швидкістю ω . Заряд кулі Q . Як знайти магнітний момент, якщо замість кулі буде циліндр радіусом R ?

Вимірювання магнітного поля Землі

Мета роботи

Експериментально визначити горизонтальну і вертикальну складові, а також магнітне нахилення місцевого геомагнітного поля.

Ключові слова: *Магнітне поле Землі, горизонтальна складова, вертикальна складова, метод імплікації.*

Обладнання: *Котушки Гельмгольца, магнітна стрілка зі шкалою, тесламетр з датчиком Хола для вимірювання величини магнітного поля.*

1. Теоретичне підґрунтя

1.1. Земний магнетизм

Про існування магнетизму було відомо з глибокої давнини. Вважається, що перший компас з'явився в Китаї. У 1600 році в книзі «Про магніті, магнітних тілах і про великий магніт — Землю» У. Гільбертом було дано уявлення про причини земного магнетизму. У 1785 почалися розробки способу вимірювання напруженості магнітного поля, що базується на методі крутного моменту, запропонованому Ш. Кулоном. У 1839 К. Гаусс теоретично обґрунтував метод вимірювання горизонтальної складової вектора магнітного поля планети. На початку ХХ ст. було визначено зв'язок між магнітним полем Землі і її будовою.

Однак, факт існування цього загадкового фізичного явища природи для сучасної науки як і раніше багато в чому неясний. Вже з середини ХХ століття загальноприйнято, що походження геомагнітного поля і основні чинники його еволюції пов'язані з процесами в рідкому зовнішньому ядрі Землі. Причина подібної впевненості полягає в наступному. Сукупність спостережних даних про магнітне поле Землі переконує нас в тому, що воно має планетарний характер і його джерела повинні знаходитися глибоко під поверхнею Землі.

Спроба пов'язати таке магнітне поле з величезним постійним магнітом входить в протиріччя з помітним зростанням температури вглиб Землі. Справді, феромагнітні властивості зникають при досягненні критичної температури, яка називається *точкою Кюрі*, та й сам образ гігантського постійного магніту десь в глибині Землі не виглядає реалістичним.

Ще одним джерелом магнітного поля Землі в принципі міг би служити розподіл зарядів, в результаті якого область між земною поверхнею і іоносферою являє собою гігантський конденсатор. Обертання Землі призводить до руху заряду цього конденсатора і електричний струм, який виникає таким чином, створює магнітне поле. Однак оцінки показують, що його напруженість набагато нижча ніж та, що спостерігається.

Ще одна з причин походження магнітного поля Землі може бути пов'язана з явищем електромагнітної індукції Фарадея. Цей механізм генерації магнітного поля називається *механізмом динамо*. Вперше механізм динамо був запропонований на початку XX століття Дж. Ларморовим для пояснення походження магнітного поля Сонця. Пізніше з дією цього механізму стали пов'язувати походження магнітних полів майже всіх небесних тіл, що мають магнітне поле. Суть механізму динамо зазвичай пояснюють як створення магнітного поля завдяки руху електропровідної рідини (плазми). Однак, пояснити походження геомагнітного поля механізмом динамо теж непросто. Справа в відомому правилі Ленца, згідно з яким додатковий струм, який з'являється в рамці зі струмом, що рухається в початковому (затравочному) магнітному полі, напрямлений таким чином, щоб зменшити затравочне магнітне поле. Іншими словами, обертання потоків провідної рідини не може призводити до самозбудження магнітного поля.

Вказати конкретний реалістичний механізм, який призводить до підсилення затравочного магнітного поля в результаті дії електромагнітної індукції, вдалося лише в 50-60 рр. XX ст. Ганнесом Альвенем. Суть ідеї полягає в тому, що магнітне поле у вакуумі, яке створюється електричним струмом, перпендикулярно до цього струму. Однак виявилось, що магнітне поле в хаотичному, турбулентному або конвективному потоці, усереднене по пульсаціям цього потоку, набуває компоненти, паралельної до електричного струму. Якщо спочатку у нас заряджена рідина, що диференціально обертається (різні частини повертаються навколо загальної осі обертання з різною кутовою швидкістю) створює «звичайне» магнітне поле перпендикулярне до струму, то згодом рідина буде захоплювати магнітне поле і витягувати його вздовж напрямку свого руху, утворюючи тороїдальні силові лінії. Цей механізм створення тороїдального поля відомий як *омега-ефект*.

1.2. Виміри

Основні виміри побудовані на принципі **імплікації постійного поля**, величина і напрям якого відомі, на невідоме магнітне поле Землі. Горизонтальна компонента магнітного поля Землі ${}^h\vec{B}_E$ розраховується із напрямку результуючої магнітної індукції ${}^h\vec{B}_R$:

$$\vec{B}_R = \vec{B}_H + \vec{B}_E \quad (5.1)$$

Індикатором напрямку результуючої **магнітної індукції** виступить магнітна

стрілка з лімбом. Стрілку потрібно встановити за напрямом горизонтальної компоненти ${}^h\vec{B}_E$ магнітного поля Землі.

Нехай забезпечено додаткове однорідне поле ${}^h\vec{B}_H$. Стрілка відхилиться на кут α і показуватиме напрям горизонтальної компоненти результуючого поля ${}^h\vec{B}_R$ (рис. 5.1).

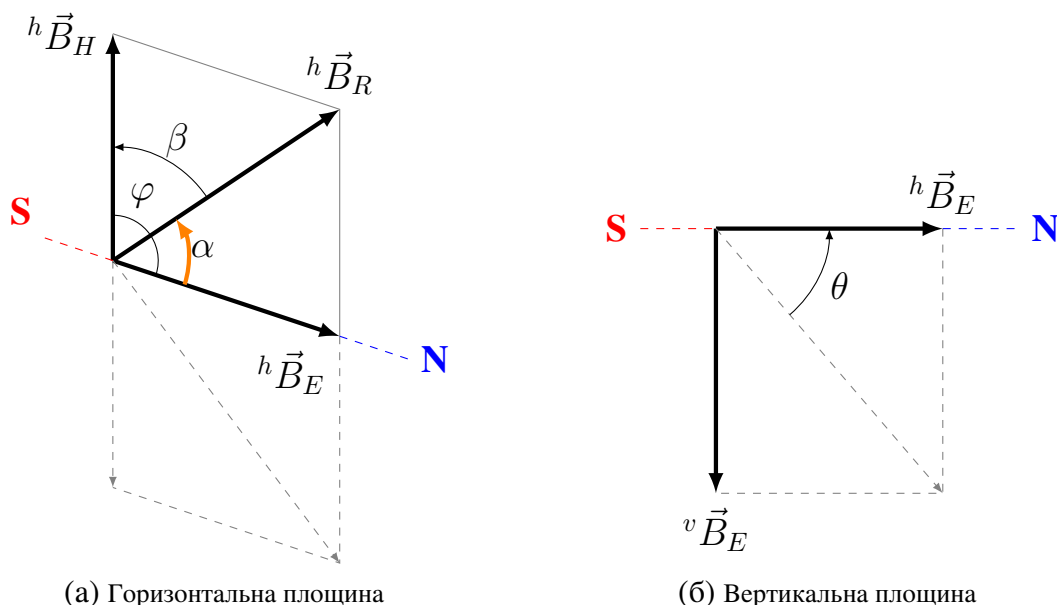


Рис. 5.1. Векторна діаграма складових магнітного поля у горизонтальній (??) та вертикальній (??) площинах. Компоненти, зображені штриховими лініями, відповідають випадку зміни полярності додаткового поля ${}^h\vec{B}_H$ (зміни напрямку струму).

З теореми синусів маємо:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{\sin \alpha}{\sin(\varphi - \alpha)} = \frac{{}^h\vec{B}_H}{{}^h\vec{B}_E} \quad (5.2)$$

Для спрощення розрахунків розглядається випадок, коли вісь котушок перпендикулярна до напрямку “Північ – Південь” ($\varphi = 90^\circ$):

$${}^h\vec{B}_E = {}^h\vec{B}_H \cdot \operatorname{ctg} \alpha \quad (5.3)$$

Поле ${}^h\vec{B}_H$ пропорційно силі струму I_H :

$${}^h\vec{B}_H = C \cdot I_H, \quad (5.4)$$

де C — калібровочний коефіцієнт; залежить від конфігурації котушки.

Тоді з рівнянь (5.2), (5.4) маємо:

$${}^h\vec{B}_E \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = C \cdot I_H. \quad (5.5)$$

В експерименті визначається залежність $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$ від $C \cdot I_H$, — вона має бути лінійною. З нахилу графіка цієї залежності безпосередньо визначається величина,

обернена до горизонтальної складової магнітного поля Землі $({}^h\vec{B}_E)^{-1}$:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{1}{{}^h\vec{B}_E} \cdot C \cdot I_H. \quad (5.6)$$

Якщо стрілку з лімбом встановити в вертикальній площині, можна безпосередньо заміряти кут θ (рис. 5.16), з якого розрахувати вертикальну компоненту магнітного поля Землі ${}^h\vec{B}_E$ та сумарну індукцію B_E :

$${}^v\vec{B}_E = {}^h\vec{B}_E \cdot \operatorname{tg} \theta, \quad (5.7)$$

$$B_E = \sqrt{{}^h\vec{B}_E^2 + {}^v\vec{B}_E^2} \quad (5.8)$$

2. Експериментальне устаткування

Схема експериментальної установки зображена на рисунку 5.2.

Котушки Гельмгольца з'єднані послідовно і підключені до джерела постійного струму через реостат та амперметр.

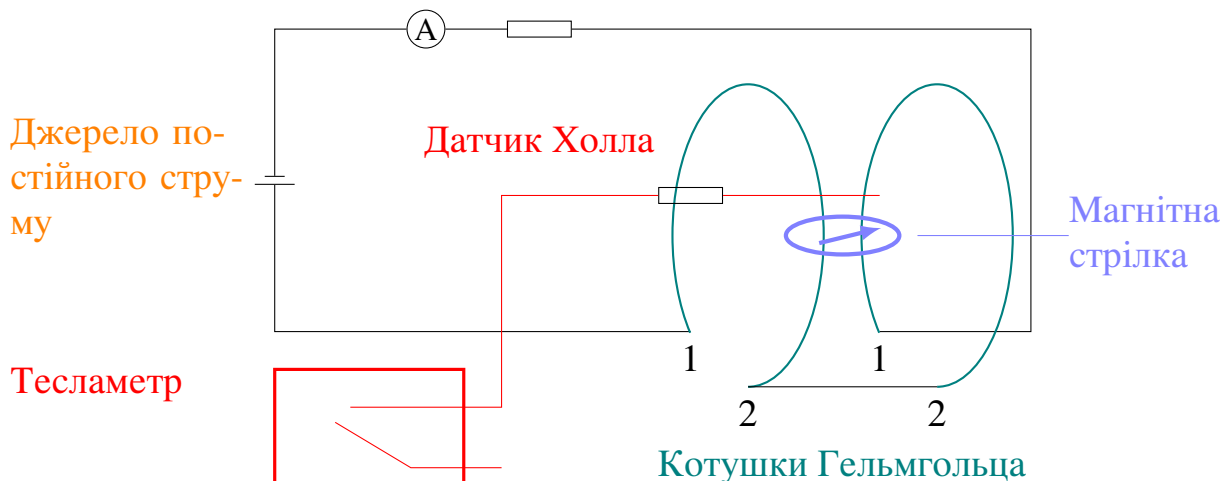


Рис. 5.2. Схема експериментальної установки: котушки Гельмгольца, джерело постійного струму, реостат, амперметр з'єднані послідовно. Для вимірювання магнітного поля – тесламетр з датчиком Холла. Для вимірювання компонент магнітного поля Землі – магнітометр з магнітною стрілкою та лімбом (на схемі – магнітна стрілка).

Магнітне поле вимірюється тесламетром з датчиком Холла, який фіксує компоненту магнітної індукції, що паралельна осі датчика.

Важливо, щоб його напрям співпадав з напрямком осей котушок. Щуп датчика встановлюється точно всередині пристрою Гельмгольца.

Чутливості теслометра не вистачає для вимірювання полів з індукцією порядку поля Землі. Тому прилад застосовується для визначення калібровочного коефіцієнту C , який отримують з графіка залежності горизонтальної компоненти магнітної індукції ${}^h\vec{B}_H$ від струму I_H котушок (5.4).

Для вимірювання горизонтальної компоненти магнітного поля Землі ${}^h\vec{B}_E$ використовується магнітометр з магнітною стрілкою, який має лімб з поділами, і

може встановлюватись уздовж проекції лінії індукції результуючого магнітного поля $\vec{B}_R$ на площину обертання стрілки.

В роботі вивчають залежність кута α від індукції поля котушок ${}^h\vec{B}_H$ за малих струмів, де α – кут відхилення магнітної стрілки від її положення рівноваги.

Індукцію поля котушок ${}^h\vec{B}_H$ визначають з сили струму I_H через котушки за допомогою калібровочного коефіцієнту K .

3. Хід роботи

3.1. Залежність ${}^h\vec{B}_H$ від I_H

Встановлюємо датчик Холла всередині пристрою Гельмгольца, точно по центру. *До початку вимірювань знімаємо покази теслометра, які слугуватимуть нульовим рівнем для наших даних.*

Знімаємо залежність горизонтальної компоненти магнітної індукції ${}^h\vec{B}_H$ від струму I_H котушок. Діапазон зміни струму – від 0 до 2 А.

3.2. Залежність α від I_H

Замість датчика Холла за допомогою штативу встановлюємо магнітометр з магнітною стрічкою так, щоб центр лімбу знаходився точно в центрі пристрою Гельмгольца, а сам лімб був розташований точно в горизонтальній площині.


Визначаємо напрямок “Північ–Південь” на кільці з поділками за відсутності струму у котушках (рис. 5.3а). Для більш докладного визначення напрямку стрілку треба легко відхилити від положення рівноваги кілька разів. *Можлива сила тертя (що досить мала) може бути зменшена легким постукуванням по штативу.*

Проводимо вимірювання кута відхилення магнітної стрілки від положення рівноваги (напрямку “Північ–Південь” цієї стрілки) як функції малих струмів у котушці. Повторюємо серію вимірювань після зміни напрямку струму в котушці на протилежний.

При вимірюванні точного кута повинні бути зафіксовані показання обох кінців стрілки.

3.3. Виміри θ

За відсутності струму котушок лімб магнітометра повертаємо у вертикальну площину так, щоб магнітна стрілка вказувала кут нахилу. Вісь обертання має співпадати з напрямком “Північ–Південь” (рис. 5.3б). З метою перевірки магнітометр повертаємо на 180° і повторюємо виміри.

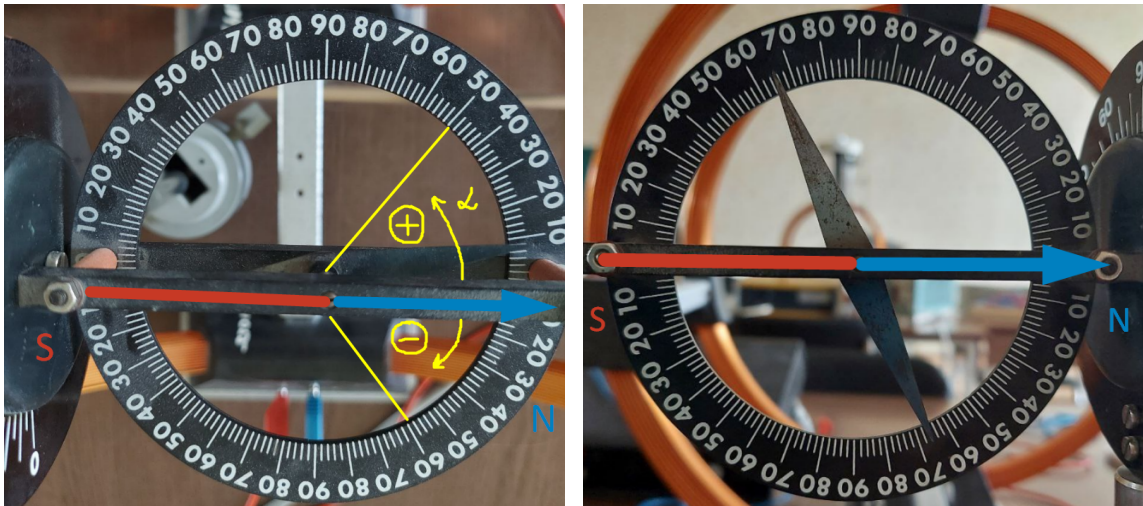

(а) Горизонтальна площина

(б) Вертикальна площина

Рис. 5.3. Магнітометр та напрямок “Північ–Південь”

4. Завдання

1. Отримати та побудувати калібровочний графік, визначити калібровочний коефіцієнт котушок Гельмгольца.
2. Визначити напрям “Північ–Південь” в точці проведення експерименту та в інших точках лабораторії. Оцінити похибку, проаналізувати джерела збурень.
3. Отримати залежність кута α від струму через котушки I_H в обох напрямках протікання струму. Побудувати графік.
4. Визначити кут φ . Побудувати графік $\sin \alpha / \sin \beta$ як функції I_H ($\beta = \varphi - \alpha$). Визначити за допомогою графіка $^h B_E$. Проаналізувати, в якому діапазоні струмів через котушки вимірювання мають найменшу похибку.
5. Визначити вертикальну компоненту магнітного поля Землі $^v B_E$, та повну індукцію магнітного поля Землі B_E .

Контрольні запитання

1. Сформулюйте, що таке магнітна індукція. У яких одиницях вона вимірюється в системі SI та гауссовій?
2. Як напрямлений вектор магнітної індукції? Дайте відповідь, спираючись на поведінку магнітної стрілки.
3. Перелічіть основні елементи земного магнетизму. Дайте означення горизонтальній та вертикальній складовим, а також магнітному нахиленню.
4. Чому північний полюс магнітної стрілки вказує на географічний Північний полюс Землі? Поясніть, де насправді знаходиться південний магнітний полюс.
5. Поясніть суть методу імплікації (накладання полів), який використовується в цій роботі для визначення горизонтальної складової магнітного поля Землі.

6. Чому в установці використовуються котушки Гельмгольца, а не одна котушка? Яка їхня ключова властивість є критично важливою для коректності експерименту?
7. Навіщо в роботі вимірюють залежність магнітного поля котушок $^h \vec{B}_H$ від сили струму I_H за допомогою тесламетра? Чому не можна виміряти поле Землі безпосередньо цим самим тесламетром?
8. У якому діапазоні струмів (малих чи великих) похибка вимірювання горизонтальної складової буде меншою? Як це пов'язано з похибкою вимірювання кута α ?
9. Поясніть, як зміна напрямку струму в котушках впливає на відхилення магнітної стрілки. Чому вимірювання проводять при обох напрямках струму?
10. Які сторонні фактори (окрім поля Землі та поля котушок) можуть впливати на показання магнітної стрілки? Як можна зменшити їхній вплив?
11. Спираючись на теоретичне введення, коротко охарактеризуйте гіпотезу гідромагнітного динамо як основну теорію походження магнітного поля Землі. У чому полягає суть омега-ефекту, описаного в роботі?
12. Дайте означення калібрувального коефіцієнта C . Від яких параметрів котушок Гельмгольца він залежить?